

FILTRE HYDROPHOBE

Pour connecter le Set de ponction à la pompe d'aspiration ovocytaire

CARACTÉRISTIQUES

- Filtre hydrophobe de 0,2 µm.
- Tubulure de 150 cm avec connexion mâle.

UTILISATION

- Ponction folliculaire à l'aide d'une pompe d'aspiration.
- S'adapte à l'ensemble des pompes d'aspiration folliculaire disponibles sur le marché.


Lors d'une ponction folliculaire avec une pompe d'aspiration, l'utilisation d'une tubulure à usage unique avec filtre hydrophobe protège la pompe d'aspiration des liquides corporels et protège également les échantillons du contact avec l'équipement.

Mise en place

Le filtre hydrophobe d'Ellios Bio Tek est conçu spécifiquement pour être utilisé lors d'une ponction folliculaire. Grâce à une connexion universelle, la tubulure s'adapte à l'ensemble des pompes d'aspiration folliculaire commercialisées. En effet, la connexion entre la pompe d'aspiration et la tubulure peut être réalisée soit via le connecteur en silicone, soit en enlevant celui-ci directement à la connexion luer de la pompe.

Risque biologique

Ne jamais procéder à une ponction folliculaire si la pompe d'aspiration folliculaire, la tubulure ou le filtre présentent des signes de contamination. La tubulure ainsi que son filtre sont des consommables à usage unique. Ils ne doivent en aucun cas être réutilisés ni restérilisés. La réutilisation peut provoquer une contamination croisée entraînant la transmission de germes infectieux. La re-stérilisation peut endommager la structure et performance du matériel aillant des répercussions sur l'intégrité des échantillons biologiques ou sur l'équipement d'aspiration. Une fois utilisé, ce produit doit être considéré à risque biologique et doit être éliminé selon la politique du centre et la réglementation en vigueur.

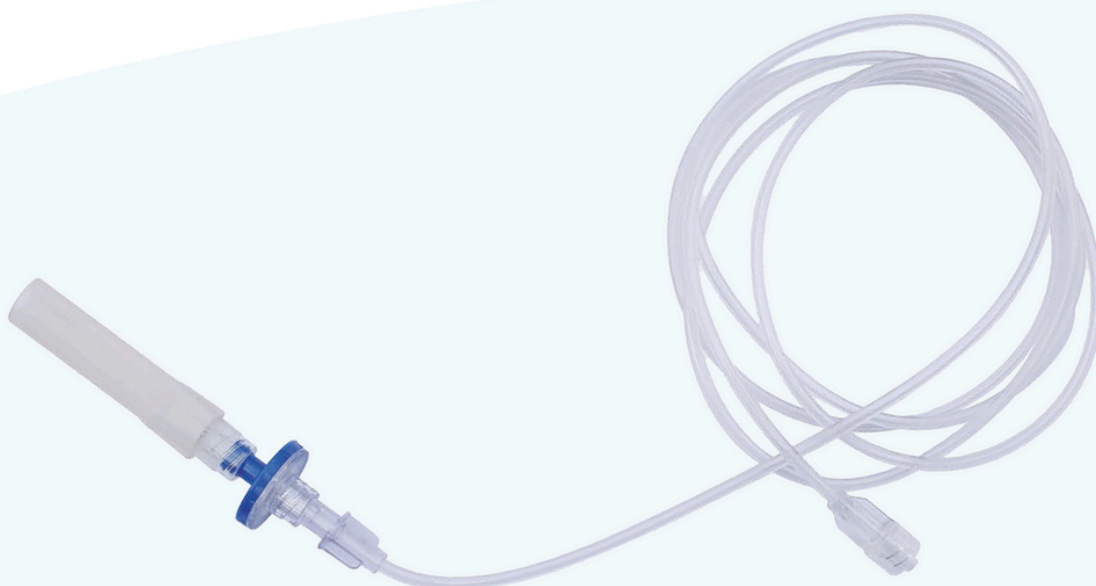

Référence	Désignation	Conditionnement	Dimensions	Stérilisation
EBT01615	Filtre hydrophobe pour set de ponction	Boîte de 25 unités Sachet individuel	Longueur du tube : 150 cm	Oxyde d'éthylène