

AIGUILLE DE PONCTION D'OVOCYTES

Biseau back cut 17 G (diam. 1.4 mm) sans mandrin

CARACTÉRISTIQUES


- Aiguille simple lumière.
- Biseau arrière (back cut). Talon émoussé.
- Deux zones échogènes **LASER** sur l'extrémité distale.
- Embase ergonomique de grande surface.
- Jeu de 4 étiquettes de traçabilité.

UTILISATION

- Ponction folliculaire sous échoguidage en vue d'une fécondation in vitro.
- Ponction de kystes ovariens.

RECOMMANDATIONS

- Rincer l'aiguille avec un milieu de culture stérile avant son utilisation.
- Fixer la seringue sur le cône luer.
- Procéder à la ponction sous échoguidage selon la voie choisie.

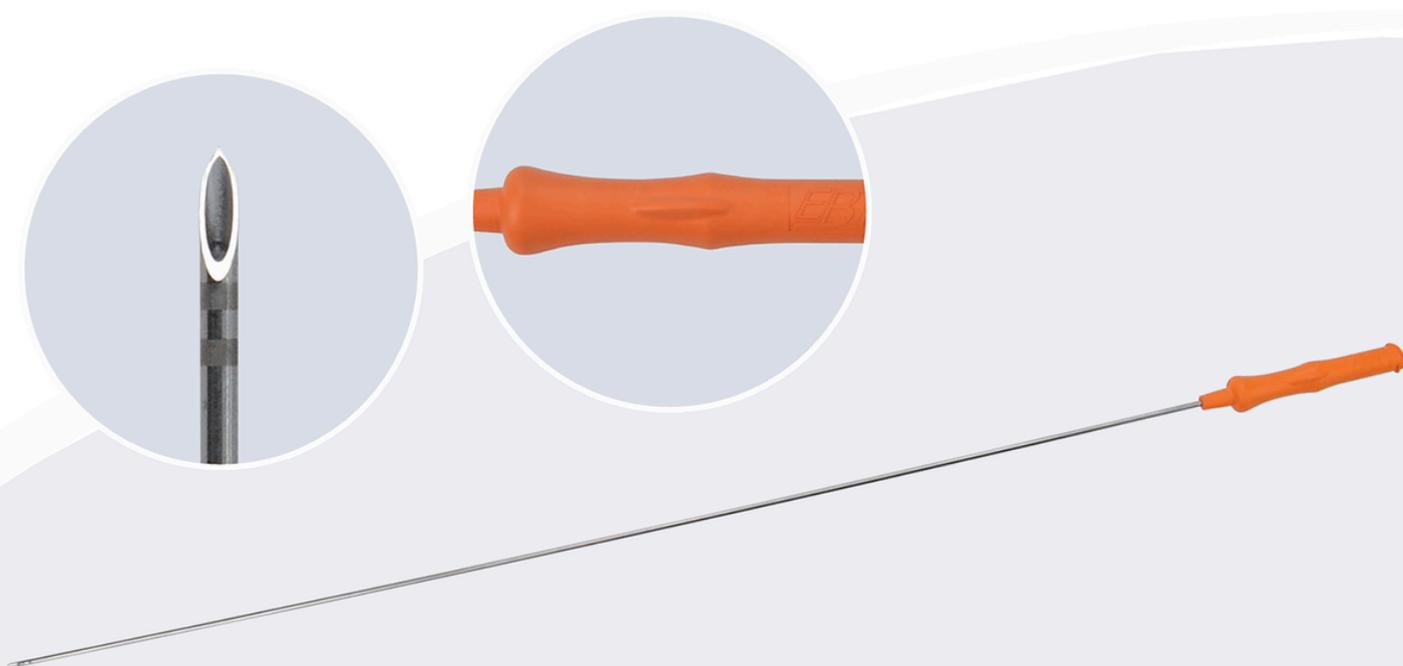

Référence	Désignation	Conditionnement	Ø ext.	Longueur	Stérilisation
EBT00030-BC-0	Aiguille de ponction d'ovocytes 1.4 B.C. sans mandrin	Boîte de 10 unités Sachet individuel	17 G (1.4 mm)	30 cm	γ irradiation